

Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

CE – Dichiarazione di conformità CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details



Prodotto/product name

LADY MEMORY

Identificazione/type

TL

T=tessuto

L=lastra interna

Variante unica

TL

Lastra 3 strati con strato di base in poliuretano Cires Spa codice 30EP da 2cm, box in molle insacchettate produttore Antecon con 850 molle (misura matrimoniale) strato superficiale da 3cm di memory foam Giuseppe Olmo Spa VE 40/T, fodera tessuto P260 con bordo sullo spigolo perimetrale e maniglie sfoderabile su 4 lati, imbottitura high tech alta qualità Ineden unita a lana (parte invernale) o cotone (parte estiva)

Destinazione d'uso/intended use

Materasso antidecubito/ / Anti-decubitus mattress/

50
19672017



Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

Classificazione 93/42/CEE, Allegato IX Classification according to RL93/42/EEC, annex IX	Classe I, per la rla 1/ class I per rule 1
Altre classificazioni/other classing	N.A.
Ente notificato/Notified body	N.A.
Numero certificato/certificate number	N.A.
Procedura di certificazioni in accordo con 93/42/CEE/Procedure according to RL93/42/EEC	Allegato VII/Annex VII
Numero di registrazione/NSIS number	1552565
Codice GMDN/GMDN code	35228
Codice CND/CND code	Y033306
Norme armonizzate/Harmonized standards	EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, EN 1957/2001, EN 10707
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è
in accordo con la direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in
compliance with directive 93/42/EEC.

Serra De' Conti(AN), 12/05/2017

LORDFLEX'S SRL

Il titolare

Guerrino Bini

50
19672017



Lady memory

materassi ortopedici ed ergonomici

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Rev. n° 1 del 13/05/17 Pag. 1 di 7

Lady memory

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Lady memory

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA	7

Lady memory

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un materasso per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo alla Direttiva Europea 93/42/CE emendata dalla 2007/47/CE sui dispositivi Medicali

Lady memory

4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

I Ladymemory sono materassi studiati appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto, e molle insacchettate indipendenti e strato superficiale in memory foam.

L'anima dei dispositivi è composta da molle insacchettate indipendenti e viscoelastico ad alta flessibilità (modello Lady memory). viscoelastico assemblati insieme per formare un unico dispositivo.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

5. INSTALLAZIONE E USO


L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.

Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta e ruotare la fodera di rivestimento in base alla stagione (lato estivo - lato invernale, per il modello Lady memory


Lady memory

6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.

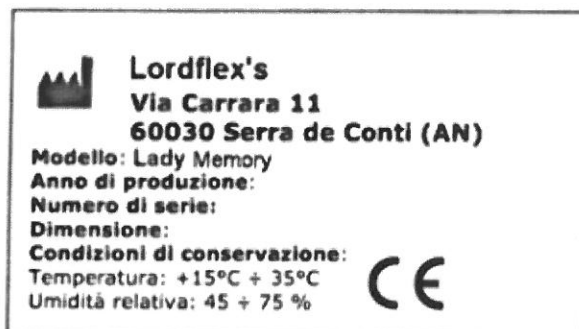

L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:

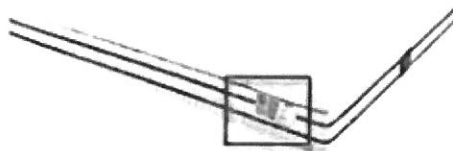

Lady memory

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua. In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Consigliamo per la fodera il lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna.

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's, farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente. In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.